




OT Equator

www.gmidental.com

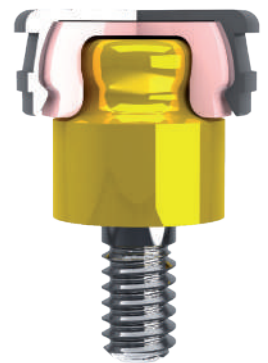

OT Equator implante - OT Equator implant

gmi® presenta **OT Equator**, la nueva línea de aditamentos directos a implante para efectuar restauraciones con sobre-dentaduras.

Con un perfil vertical bajo este sistema ofrece múltiples soluciones para la restauración con sobre-dentaduras cuando el espacio vertical es limitado.

Características principales - Main features

Las dimensiones del sistema OT Equator son menores que las de los sistemas ERA y Locator, ya que tiene una altura de 2,10 mm y una anchura máxima de 4,40 mm cuando la retención está montada sobre el pilar. Permite compensar un máximo de 15° de **disparalelismo** entre implantes.

Disponible para los implantes **gmi® frontier** de plataformas RP y WP, **gmi® frontier PEAK** de plataforma RP, **gmi® avantgard** de plataformas RP y WP, **gmi® avantgard PEAK** de plataforma RP, **gmi® phoenix** de plataforma Ø4,10 con alturas de emergencia de 1 a 5,5 mm y **gmi® monolith**.

Las cofias se insertan en un contenedor de acero inoxidable y están disponibles en cuatro niveles de retención, facilitando el trabajo ya sea en el laboratorio dental o en la misma consulta del odontólogo.

OT Equator System specifications is smaller than ERA and Locator Systems with vertical dimensions of 2.1 mm and 4.4 mm overall width with the female cap in place.


Allows compensation for up to 15° of **misalignment** between implants.

Available for **gmi® frontier** RP and WP, **gmi® frontier PEAK** RP, **gmi® avantgard** RP and WP, **gmi® avantgard PEAK** RP, **gmi® phoenix** Ø4.10 platform with emergency heights from 1 to 5.5 mm and **gmi® monolith** implants.

Female caps are retained by means of a stainless steel housing ranging in four levels of retention, making it easy to process at the dental laboratory or chairside in the dental office.

gmi® introduce **OT Equator**, the newest line of low profile direct implant overdenture attachments.

With a low vertical profile, this system offers multiple solutions for overdenture treatment planning when vertical space limitations are a consideration.

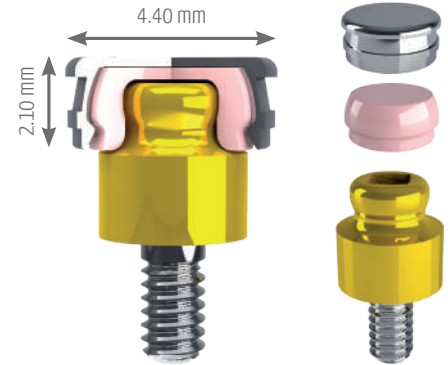

OT Equator calcinable - OT Equator castable

gmi® presenta **OT Equator Calcinable**, la nueva línea de aditamentos que permite efectuar restauraciones con sobredentaduras sobre barras, pilares unitarios colados o coronas coladas intra-radicales.

De la misma forma que los aditamentos directos a implante, este sistema consta de un perfil vertical bajo, ofreciendo múltiples soluciones para la restauración con sobredentaduras cuando el espacio vertical es limitado.

gmi® introduce **OT Equator Castable**, the newest line of attachments for overdentures restorations supported by milled bar prosthesis, single castable abutments or cast crowns over roots.

Similar to direct implant attachments, this system features a low vertical profile, offering multiple solutions for overdenture treatment planning when vertical space limitations are a consideration.

Características principales - Main features

- Material plástico calcinable en color rojo.
- Contenedor de acero inoxidable y cofias de retención con cuatro niveles de retención compatibles con OT Equator.
- Red castable plastic material.
- Stainless steel housing and retentions caps with 4 different retention grades compatible with OT Equator profile.




Retenciones OT Equator implante y calcinable - OT Equator implant and castable retentions

Ref.	Descripción - Description	Ud - Un.
RH140CEV	Cofia retentiva morada - Fuerte: 2,70 Kg · Purple cap strong retention - 2.70 Kg	4
RH140CET	Cofia retentiva blanca - Estándar: 1,80 Kg · Clear cap standard retention - 1.80 Kg	4
RH140CER	Cofia retentiva rosa - Suave: 1,20 Kg · Pink cap soft retention - 1.20 Kg	4
RH140CEG	Cofia retentiva amarilla - Extra-Suave: 0,60 Kg · Yellow cap Ex/Soft retention - 0.60 Kg	4
RH140CEN	Cofia negra - Laboratorio · Processing caps	4
RH141CAE	Contenedor acero para cofias · Stainless steel housings	2
RH100PD	Disco protector · Protective disk	10



Accesorios OT Equator implante - OT Equator implant accessories

Ref.	Descripción - Description	Ud - Un.
RH044CAIN	Transfer acero c/cofia para impresión · Stainless steel impression copings	2
RH144AE	Réplica Equator para laboratorio · Stainless steel analogs x lab.	2

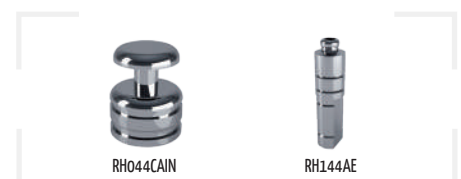

Instrumental OT Equator implante - OT Equator implant tools

Ref.	Descripción - Description
RH774CHE	○ Llave cuadrada c/holder Equator · Square driver w/holder Equator
RH760CE	○ Llave cuadrada para micromotor 1,25 mm · Torque connector Equator 1.25 mm
RH680BRK	● Kit extractor tornillos rotos Phoenix · Phoenix broken screw extractor kit
RH680CV	● Kit extractor tornillos rotos Frontier · Frontier broken screw extractor kit
RH680FS	○ Fresa especial kit extractor tornillos · Screw extractor kit special drill
KYLOF0132	○ LLCIP - Llave pilar Equator · TIRW - Equator abutment wrench



Instrumental OT Equator implante y Calcinable - OT Equator implant and castable tools

Ref.	Descripción - Description
RH485IC	○ Insertador / extractor de cofias · Insertion / extractor tool for caps



Kits OT Equator implante - OT Equator implant kits

Ref.	Descripción - Description	Ref.	Descripción - Description
Frontier / Frontier PEAK RP		Avantgard / Avantgard PEAK RP	
RH130CV1	●● Kit Equator RP HEX-2,45 h1,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h1.0 mm	RH130AR15	●●● Kit Equator RP h=1,5 mm Avantgard · Kit Equator RP h=1.5 mm Avantgard
RH130CV2	●●● Kit Equator RP HEX-2,45 h2,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h2.0 mm	RH130AR25	●●● Kit Equator RP h=2,5 mm Avantgard · Kit Equator RP h=2.5 mm Avantgard
RH130CV3	●●● Kit Equator RP HEX-2,45 h3,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h3.0 mm	RH130AR35	●●● Kit Equator RP h=3,5 mm Avantgard · Kit Equator RP h=3.5 mm Avantgard
RH130CV4	●●● Kit Equator RP HEX-2,45 h4,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h4.0 mm	RH130AR45	●●● Kit Equator RP h=4,5 mm Avantgard · Kit Equator RP h=4.5 mm Avantgard
RH130CV5	●●● Kit Equator RP HEX-2,45 h5,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h5.0 mm	RH130AR55	●●● Kit Equator RP h=5,5 mm Avantgard · Kit Equator RP h=5.5 mm Avantgard
RH130CV6	●●● Kit Equator RP HEX-2,45 h6,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h6.0 mm	RH130AW15	●●● Kit Equator WP h=1,5 mm Avantgard · Kit Equator WP h=1.5 mm Avantgard
RH130CV7	●●● Kit Equator RP HEX-2,45 h7,0 mm · Kit Equator RP HEX-2.45 h7.0 mm	RH130AW25	●●● Kit Equator WP h=2,5 mm Avantgard · Kit Equator WP h=2.5 mm Avantgard
RH130BV1	●●● Kit Equator WP HEX-2,45 h1,0 mm · Kit Equator WP HEX-2.45 h1.0 mm	RH130AW35	●●● Kit Equator WP h=3,5 mm Avantgard · Kit Equator WP h=3.5 mm Avantgard
RH130BV2	●●● Kit Equator WP HEX-2,45 h2,0 mm · Kit Equator WP HEX-2.45 h2.0 mm	RH130AW45	●●● Kit Equator WP h=4,5 mm Avantgard · Kit Equator WP h=4.5 mm Avantgard
RH130BV3	●●● Kit Equator WP HEX-2,45 h3,0 mm · Kit Equator WP HEX-2.45 h3.0 mm	RH130AW55	●●● Kit Equator WP h=5,5 mm Avantgard · Kit Equator WP h=5.5 mm Avantgard
RH130BV4	●●● Kit Equator WP HEX-2,45 h4,0 mm · Kit Equator WP HEX-2.45 h4.0 mm	Monolith	
Phoenix		RH130MTH	●●● Kit Equator Monolith · Kit Equator Monolith
RH130BRK2	●●● Kit Equator PL-Ø4,1 HEX-2,7 h2,0 mm · Kit Equator PL-Ø4.10 HEX-2.70 h2.0 mm		
RH130BRK3	●●● Kit Equator PL-Ø4,1 HEX-2,7 h3,0 mm · Kit Equator PL-Ø4.10 HEX-2.70 h3.0 mm		
RH130BRK4	●●● Kit Equator PL-Ø4,1 HEX-2,7 h4,0 mm · Kit Equator PL-Ø4.10 HEX-2.70 h4.0 mm		

El kit incluye:

- 1 Pilar OT Equator para implante
- 1 Contenedor de acero para cofia
- 1 Disco protección
- 4 Cofias retentivas variadas (Extra-Suave / Suave / Estándar / Fuerte)

Kit includes:

- 1 Titanium implant abutment
- 1 Stainless steel housing
- 1 Protective disk
- 4 Retentive caps (Extra-Soft / Soft / Standard / Strong)



Kit OT Equator Smart Box con cofias - OT Equator Smart Box with caps kit - RH335SBC

El nuevo **Smart Box** es un contenedor para cofias con un diseño innovador que, gracias a un mecanismo de inclinación con un fulcro de rotación, permite compensar hasta 50° de **disparalelismo** entre implantes dentales. Su diseño mecánico interno permite una inserción pasiva de la prótesis manteniendo la perfecta funcionalidad de los componentes elásticos, proporcionando confort y funcionalidad en los tratamientos de sobredentadura retenida por implantes.

The new **Smart Box** is a container for caps with a innovative design that, thanks to a tilting mechanism with a fulcrum of rotation, allows compensation of up to 50° of **misalignment** between dental implants.

Its mechanical internal design allows a passive insertion of the denture keeping the perfect functionality of the elastic components providing comfort and functionality in implant-retained overdenture treatments.



El kit incluye:

- 1 contenedor Smart Box con cofia negra de posicionamiento
- 1 disco protector rosa
- 4 cofias retentivas variadas (Extra-suave / Suave / Estándar / Fuerte)

Kit includes:

- 1 Smart Box housing with black positioning cap
- 1 pink protective disk
- 4 retentive caps (Extra-soft / Soft / Standard / Strong)

Kit OT Equator Calcinable - OT Equator Castable kit - Ref. RH092ECQ


El kit incluye:

- 2 Machos calcinables
- 2 Cofias rosas (retención suave)
- 2 Cofias blancas (retención estándar)
- 2 Contenedores de acero

Kit includes:

- 2 Castable males
- 2 Pink caps (soft retention)
- 2 Clear caps (standard retention)
- 2 Stainless steel housing



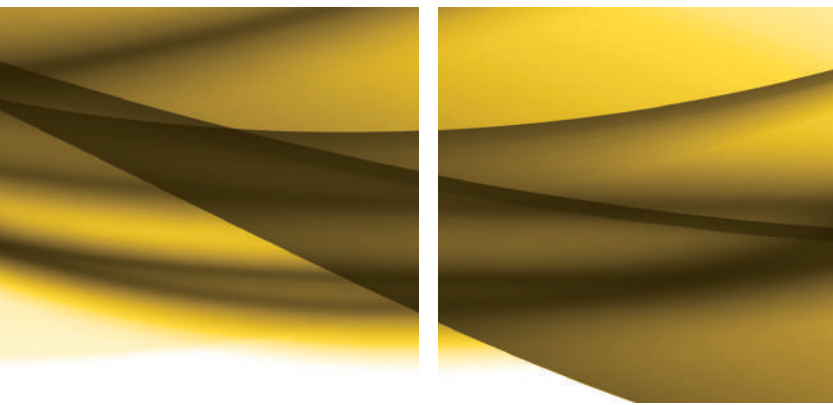

Distribuido por - Distributed by:

GMI Dental Implantology, S.L.

Pol. Ind. El Segre · C/ Enginyer Mies 705-B · 25191 Lleida (SPAIN)
Tel. (+34) 973 184 350 · info@gmidental.com · www.gmidental.com

