




OT Equator

www.gmidental.com

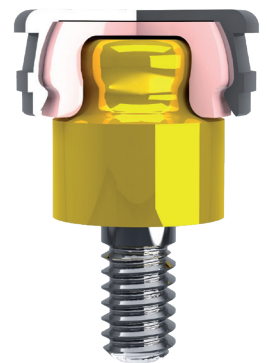

OT Equator implant - OT Equator implantieren

gmi® présente **OT Equator**, la nouvelle ligne d'attachements directs à l'implant pour effectuer des restaurations avec des prothèses supra-dentaires.

Avec un profil vertical bas, ce système offre de multiples solutions pour la restauration avec prothèses supra-dentaires lorsque l'espace vertical est limité.

gmi® stellt **OT Equator** vor, die neue Linie von Direktimplantat-Abutments für Deckprothesen-Versorgung.

Mit einem niedrigen Vertikalprofil bietet dieses System vielfältige Lösungen für die Versorgung mit Deckprothesen bei begrenztem senkrechtem Raum.

Principales caractéristiques - Hauptmerkmale

Les dimensions du système OT Equator sont inférieures à celles des systèmes ERA et Locator, leur hauteur étant en effet de 2,10 mm et leur largeur maximum de 4,40 mm lorsque la rétention est montée sur le pilier. Il permet de compenser un écart maximal de 15° entre les implants.

Disponible pour les implants gmi® **frontier RP** et **WP**, **frontier PEAK RP**, **avantgard RP** et **WP**, **avantgard PEAK RP**, **phoenix** à plateforme Ø4,10 avec des hauteurs d'émergence de 1 à 5,5 mm et implants **monolith**.


Les coiffes sont insérées dans un conteneur en acier inoxydable et sont disponibles en quatre niveaux de rétention, ce qui facilite le travail que ce soit dans le laboratoire dentaire ou chez l'odontologue.

Die Abmessungen des Systems OT Equator sind mit einer Höhe von 2,10 mm und einer maximalen Breite von 4,40 mm bei einer auf dem Pfeiler montierten Retention geringer als die der Systeme ERA und Locator.

Es ermöglicht den Ausgleich einer maximalen Abweichung von 15° zwischen den Implantaten.

Verfügbar für gmi® **frontier RP** und **WP**, **frontier PEAK RP**, **avantgard RP** und **WP**, **avantgard PEAK RP**, **phoenix** Ø4.10 Plattform Implantate mit Kragenhöhen von 1 bis 5,5 mm und **monolith** Implantate.

Die Kappen werden in einen Behälter aus rostfreiem Stahl eingesetzt und sind in vier Retentionsstufen verfügbar, um die Arbeit im Dentallabor wie auch in der Zahnarztpraxis zu erleichtern.

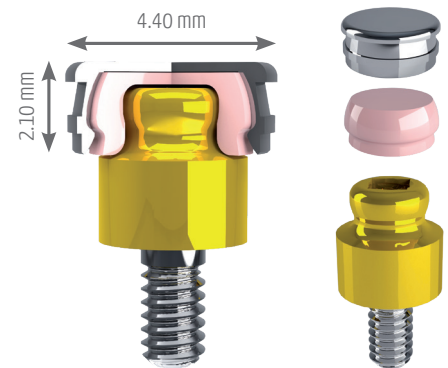

OT Equator calcinable - OT Equator Kunststoffkappe

gmi® présente **OT Equator Calcinable**, la nouvelle ligne d'attachements qui permet d'effectuer des restaurations avec des prothèses supra-dentaires sur barres, piliers unitaires collés ou couronnes collées intra-radicaire.


Tout comme pour les attachements directs sur l'implant, ce système comprend un profil vertical bas, il offre de multiples solutions pour la restauration avec des prothèses supra-dentaires lorsque l'espace vertical est limité.

gmi® stellt **OT Equator Kunststoffkappe** vor, die neue Linie von Direktimplantat-Abutments für Deckprothesen-Versorgung auf Stegen, gegossene Einzel-Abutments oder gegossene Wurzel - Kronen.

Genau wie Direktimplantat-Abutments besteht dieses System aus einem niedrigen Vertikalprofil und bietet vielfältige Lösungen für die Versorgung mit Deckprothesen bei begrenztem senkrechtem Raum.

Principales caractéristiques - Hauptmerkmale

- Matériau plastique calcinable de couleur rouge.
- Conteneur en acier inoxydable et coiffes de rétention avec quatre niveaux de rétention compatibles avec OT Equator.
- Rotes gießbares Kunststoffmaterial.
- Behälter aus rostfreiem Stahl und mit OT Equator kompatible Retentionskappen mit vier Retentionsstufen.

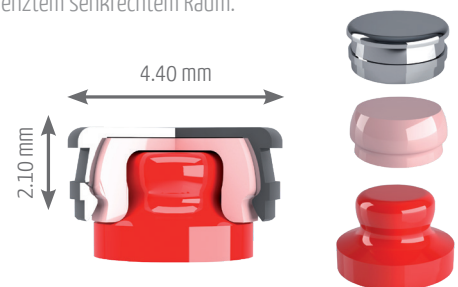


Rétentions OT Equator implant et calcinable - Retentionen OT Equator implantieren und Kunststoffkappe

Ref.	Description - Beschreibung	Ud - EH.
RH140CEV	Coiffe de rétention violette - Forte : 2,70 kg · Retentionskappe lila - Stark: 2,70 Kg	4
RH140CET	Coiffe de rétention blanche - Standard : 1,80 kg · Retentionskappe weiß - Standard: 1,80 Kg	4
RH140CER	Coiffe de rétention rose - Douce : 1,20 kg · Retentionskappe rosa - weich: 1,20 Kg	4
RH140CEG	Coiffe de rétention jaune - Extra-douce : 0,60 kg · Retentionskappe gelb - Extra-weich: 0,60 Kg	4
RH140CEN	Coiffe noire - Laboratoire · Schwarze Kappe - Labor	4
RH141CAE	Conteneur acier pour coiffes · Stahlbehälter für Kappen	2
RH100PD	Disque protecteur · Schutzscheibe	10




Accessoires OT Equator implant - Zubehörteile OT Equator implantieren

Ref.	Description - Beschreibung	Ud - EH.
RH044CAIN	Transfert acier avec coiffe pour empreinte · Stahltransfer m/Abformkappe	2
RH144AE	Réplique Equator pour laboratoire · Laboranalog Equator	2

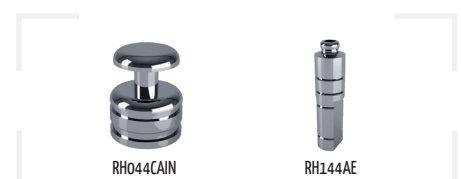

Kit d'instruments OT Equator implant - Instrumentarium OT Equator implantieren

Ref.	Description - Beschreibung
RH774CHE ○	Clé carrée c/holder Equator · Vierkantschlüssel m/Equator-Halter
RH760CE ○	Clé carrée pour micromoteur 1,25 mm · Vierkantschlüssel für Mikromotor 1,25 mm
RH680BRK ●	Kit d'extraction de vis cassées Phoenix · Phoenix-Schraubenausdreher-kit
RH680CV ●	Kit d'extraction de vis cassées Frontier · Frontier-Schraubenausdreher-kit
RH680FS ○	Foret spéciale kit d'extracteur de vis · Spezieller Bohrer Schraubenausdreher-kit
KYLOF0132 ○	CCIP - clé pour pilier Equator · TIRL-Equator Abutment - Schlüssler

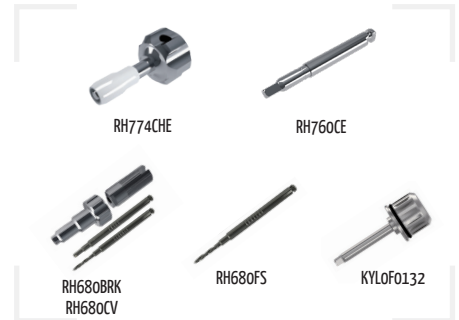

Instruments OT Equator implant et calcinable - OT Equator implantiere und Kunststoffkappe Instrumente

Ref.	Description - Beschreibung
RH485IC ○	Inserteur / extracteur de coiffes · Kappeneinführer / Kappenzieher



Kits OT Equator implant - OT Equator implantat-kit

Ref.	Description - Beschreibung	Ref.	Description - Beschreibung
Frontier / Frontier PEAK RP		Avantgard / Avantgard PEAK RP	
RH130CV1 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h1,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h1.0 mm	RH130AR15 ●●	Kit Equator RP h=1,5 mm Avantgard · Equator-kit RP h=1.5 mm Avantgard
RH130CV2 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h2,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h2.0 mm	RH130AR25 ●●	Kit Equator RP h=2,5 mm Avantgard · Equator-kit RP h=2.5 mm Avantgard
RH130CV3 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h3,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h3.0 mm	RH130AR35 ●●	Kit Equator RP h=3,5 mm Avantgard · Equator-kit RP h=3.5 mm Avantgard
RH130CV4 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h4,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h4.0 mm	RH130AR45 ●●	Kit Equator RP h=4,5 mm Avantgard · Equator-kit RP h=4.5 mm Avantgard
RH130CV5 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h5,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h5.0 mm	RH130AR55 ●●	Kit Equator RP h=5,5 mm Avantgard · Equator-kit RP h=5.5 mm Avantgard
RH130CV6 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h6,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h6.0 mm	RH130AW15 ●●	Kit Equator WP h=1,5 mm Avantgard · Equator-kit WP h=1.5 mm Avantgard
RH130CV7 ●●	Kit Equator RP HEX-2,45 h7,0 mm · Equator-kit RP HEX-2.45 h7.0 mm	RH130AW25 ●●	Kit Equator WP h=2,5 mm Avantgard · Equator-kit WP h=2.5 mm Avantgard
RH130BV1 ●	Kit Equator WP HEX-2,45 h1,0 mm · Equator-kit WP HEX-2.45 h1.0 mm	RH130AW35 ●●	Kit Equator WP h=3,5 mm Avantgard · Equator-kit WP h=3.5 mm Avantgard
RH130BV2 ●	Kit Equator WP HEX-2,45 h2,0 mm · Equator-kit WP HEX-2.45 h2.0 mm	RH130AW45 ●●	Kit Equator WP h=4,5 mm Avantgard · Equator-kit WP h=4.5 mm Avantgard
RH130BV3 ●	Kit Equator WP HEX-2,45 h3,0 mm · Equator-kit WP HEX-2.45 h3.0 mm	RH130AW55 ●●	Kit Equator WP h=5,5 mm Avantgard · Equator-kit WP h=5.5 mm Avantgard
RH130BV4 ●	Kit Equator WP HEX-2,45 h4,0 mm · Equator-kit WP HEX-2.45 h4.0 mm	Monolith	
Phoenix		RH130MTH ●	Kit Equator Monolith · Equator-kit Monolith
RH130BRK2 ●	Kit Equator PL-Ø4,1 HEX-2,7 h2,0 mm · Equator-kit PL-Ø4.10 HEX-2.70 h2.0 mm		
RH130BRK3 ●	Kit Equator PL-Ø4,1 HEX-2,7 h3,0 mm · Equator-kit PL-Ø4.10 HEX-2.70 h3.0 mm		
RH130BRK4 ●	Kit Equator PL-Ø4,1 HEX-2,7 h4,0 mm · Equator-kit PL-Ø4.10 HEX-2.70 h4.0 mm		



Le kit inclut:

- 1 Pilier OT Equator pour implant
- 1 Conteneur en acier pour coiffe
- 1 Disque de protection
- 4 Coiffes diverses rétentions (Extra-douce / Douce / Standard / Forte)

Das Kit enthält:

- 1 Implantat-Abutment OT Equator
- 1 Stahlbehälter für Kappen
- 1 Schutzscheibe
- 4 Retentionskappen (Extra-weich/ weich / Standard / Stark)

Kit OT Equator Smart Box avec coiffes - OT Equator Smart Box-kit mit Kappen - RH335SBC

La nouvelle **Smart Box** est un conteneur pour les coiffes avec un conception innovante qui, grâce à un mécanisme d'inclinaison avec un pivot de rotation, permet de compenser jusqu'à **50° de disparallélisme** entre les implants dentaires.

Sa conception mécanique interne permet une insertion passive de la prothèse tout en conservant la fonctionnalité parfaite des composants élastiques, offrant confort et fonctionnalité dans les traitements de prothèse sur implant.

Die neue **Smart Box** ist ein Behälter für Kappen mit einem innovativen Design, der dank eines Kippmechanismus mit Drehpunkt eine Kompensation von bis zu **50° Disparallellität** zwischen Zahnimplantaten ermöglicht.

Das mechanische Innendesign ermöglicht ein passives Einsetzen der Prothese, wobei die perfekte Funktionalität der elastischen Komponenten erhalten bleibt, was Komfort und Funktionalität bei implantatgetragenen Overdenture-Behandlungen bietet.



Le kit inclut:

- 1 conteneur Smart Box avec coiffe de positionnement noir
- 1 disque protecteur rose
- 4 coiffes rétentives assorties (Extra-douce / Douce / Standard / Forte)

Das Kit enthält:

- 1 Smart Box Gehäuse mit schwarzer Positionierkappe
- 1 rosa Schutzscheibe
- 4 Retentionskappen (Extra weich / Weich / Standard / Stark)

Kit OT Equator Calcinable - OT Equator Kunststoffkappen-Kit - Ref. RH092ECQ


Le kit inclut:

- 2 Mâles calcinables
- 2 Coiffes roses (rétention douce)
- 2 Coiffes blanches (rétention standard)
- 2 Conteneurs en acier

Das Kit enthält:

- 2 gießbare Patrizen
- 2 rosa Kappen (weiche Retention)
- 2 weiße Kappen (Standard-Retention)
- 2 Stahlbehälter



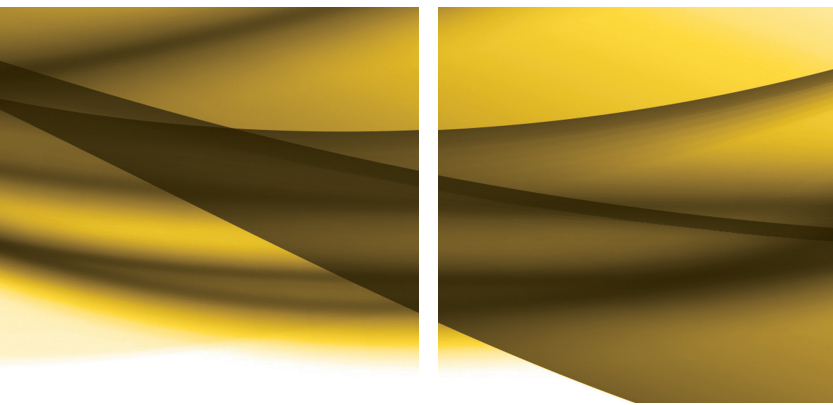

Distribué par - Vertrieb:

GMI Dental Implantology, S.L.

Pol. Ind. El Segre · C/ Enginyer Mies 705-B · 25191 Lleida (SPAIN)
Tel. (+34) 973 184 350 · info@gmidental.com · www.gmidental.com

